

SIGVARIS COMPRESSION STOCKINGS

Product Catalog

Find us on social media
SIGVARIS GROUP INDONESIA



Selection of compression class

CCL 1

18-21 mmHg

- Heavy, tired legs with a tendency to swelling in the legs
- Prevention of thrombosis and embolism in immobile patients
- Prevention of Economy class syndrome (deep vein thrombosis)
- Superficial varicose veins without leg oedema
- Superficial varicose veins during pregnancy

CCL 2

23-32 mmHg

- Varicose veins with mild leg oedema
- After varicose vein treatment (surgical procedures, sclerotherapy, endovenous treatments) to maintain treatment success
- Deep vein thrombosis
- Post-thrombotic syndrome
- Aseptic superficial thrombophlebitis
- After the healing of venous ulcers in patients with chronic venous insufficiency
- Severe varicose veins during pregnancy

CCL 3

34-46 mmHg

- Active venous leg ulcers
- Recurrent venous leg ulcers
- Forms of advanced CVI such as lipodermatosclerosis
- Reversible lymphoedema, lipoedema
- Post-traumatic syndrome
- Angiodysplasia

CCL 4

min 46 mmHg

- Irreversible lymphoedema
- Severe post-thrombotic syndrome

Stocking with the indications for class 3 and 4 should only be prescribed by medical specialists

Essential

THERMOREGULATING



A-D



A-G



A-T

Dengan kandungan serat katun, Essential THERMOREGULATING memiliki efek termoregulasi yang baik saat menempel pada kulit. Serat katun mencegah kelembaban kulit dan berkembangnya bakteri, sehingga sangat cocok untuk kulit sensitif.

Indikasi :

- Varises
- Pencegahan & Treatment CVI (Chronic Venous Insufficiency)
- Pencegahan & Treatment DVT (Deep Vein Thrombosis)
- Post Sclerotherapy, Post Veint Surgery, Post EVLT
- Edema

CCL 1

18 mmHg - 21 mmHg

CCL 2

23 mmHg - 32 mmHg

CCL 3

34 mmHg - 46 mmHg

Open Toe
Closed Toe



Quadrinova
Knobbed grip top



nature





A-D



A-G



A-T

Dynaven CLASSIC, adalah stocking yang fungsional dan efektif untuk pencegahan dan treatment varises. Tidak transparan sehingga dapat menutupi varises dan penyakit vena lainnya. Dynaven CLASSIC sangat ideal untuk pria dan wanita.

Indikasi :

- Varises
- Pencegahan & Treatment CVI (Chronic Venous Insufficiency)
- Pencegahan & Treatment DVT (Deep Vein Thrombosis)
- Post Sclerotherapy, Post Veint Surgery, Post EVLT
- Edema

CCL 1

18 mmHg - 21 mmHg

CCL 2

23 mmHg - 32 mmHg

Open Toe
Closed Toe



Quadrinova
Knobbed grip top



caramel



black



ARM SLEEVES ADVANCE

Compression arm sleeves



Stocking Lengan Kompresi untuk mencegah, mengobati dan merawat Lymphoedema lengan yaitu pembengkakan lengan yang disebabkan gangguan pada kelenjar getah bening seperti pada kanker payudara

Keunggulan :

- **Silver ion - enriched polyamide microfiber**
serat lembut dengan kandungan anti bakteri sehingga mencegah bau dan iritasi kulit.
- **Thermal Regulating Modal Viscose**
seperti halnya katun mampu menyerap keringat dan juga tidak panas saat dipakai.
- **Fine Sewing**
nyaman di gunakan dengan sistem perajutan yang optimal



Inelastic Wrap - Calf

Compreflex® Standard Calf



Lymphoedema, penyakit vena dan perawatan luka hanyalah beberapa indikasi yang dapat di atasi dengan alat ini. dilengkapi dengan Accutab® Device untuk menentukan tingkat kompresi yang disarankan.

Indication

- Lymphedema
- Edema
- Chronic venous disease (CVD)
- Chronic Venous Insufficiency (CVI)
- Venous Leg Ulcer
- Lipedema



- Basic liners non-compressive

Compression Level

21-46 mmHg

Includes

- Basic liners non-compressive
- Accutab® Device



Colours

Black



Liners for

Coolflex™ & Compreflex®

Basic liners

Non-compressive

Colour

Grey



Features

- Easy to apply knee-high liners
- *drirelease*® moisture wicking and odor control
- Flat seams for added comfort
- Silver ionized treatment for bacteriostatic properties
- Size: one size fits all

Included with

- Coolflex™ Standard Calf
- Compreflex® Standard Calf
- Also available separately

Transition liners

10-15 mmHg in foot and ankle

Colour

Black



Features

- Soft, flat seam knee-high liners
- *drirelease*® moisture wicking and odor control
- Mild compression in foot and ankle only
- Padded sole from toe to heel for added comfort
- Silver ionized treatment for bacteriostatic properties
- Sizes: sizing chart on page 26

Included with

- Compreflex® Transition Calf
- Also available separately

Complete liners

10-15 mmHg in foot, ankle and calf

Colour

Black



Features

- Comfortable knee-high liners
- *drirelease*® moisture wicking and odor control
- Mild compression in foot, and ankle calf
- Padded sole from toe to heel for added comfort
- Silver ionized treatment for bacteriostatic properties
- Sizes: sizing chart on page 26

Included with

- Compreflex® Complete Calf
- Also available separately

Inelastic Wrap - Foot

Compreboot Standard



Fitur:

- Tingkat Kompresi: ≤ 46 mmHg
- Ideal untuk edema/limfedema ringan-sedang pada pedal kaki
- Dilengkapi bahan neoprena dengan tab pengait dan pengait
- Peregangan empat arah untuk kompresi yang kuat di sekitar pergelangan kaki
- Memberikan kompresi terapeutik yang moderat
- Kombinasikan dengan Compreflex® Standard Calf, Compreboot Knee dan Thigh untuk full leg compressions

Inelastic Wrap - Knee

Compreflex® Standard Knee



Fitur:

- Tingkat Kompresi: ≤ 46 mmHg
- Dilengkapi dengan Accutab® Device sebagai indikator tekanan kelas kompresi
- Ideal untuk edema/limfedema ringan-sedang
- Dilengkapi bahan neoprena dengan tab pengait dan pengait
- Peregangan empat arah untuk kompresi yang kuat di sekitar lutut
- Memberikan kompresi terapeutik yang moderat
- Kombinasi dengan Compreflex® Standard Calf, Knee, Thigh, dan Compreboot untuk full leg compressions

Indication

- Lymphedema
- Edema
- Chronic venous disease (CVD)
- Chronic Venous Insufficiency (CVI)
- Venous Leg Ulcer
- Lipedema

Compression Level

21-46 mmHg

Includes

- Accutab® Device



Colours

Black



Inelastic Wrap - Thigh

Compreflex® Standard Thigh



Fitur:

- Tingkat Kompresi: ≤ 46 mmHg
- Dilengkapi dengan Accutab® Device sebagai indikator tekanan kelas kompresi
- Breath-O-prene yang lembut dan sesuai dengan bentuk tubuh memberikan kenyamanan dan menyerap kelembapan
- Pemanjang tali dapat digunakan jika pasien melebihi rentang ukuran standar
- Kombinasikan dengan Compreflex Standard Calf, Thigh, Knee dan Compreboot untuk full leg compressions

Indication

- Lymphedema
- Edema
- Chronic venous disease (CVD)
- Chronic Venous Insufficiency (CVI)
- Venous Leg Ulcer
- Lipedema

Compression Level

21-46 mmHg

Includes

- cotton liners
- Accutab® Device
- Belt & Hip attachment (colour: black)



ULCER X



ULCER X adalah stocking kompresi sangat ideal pada kasus luka vena.

Benefit:

- Cara pemakaian dengan mudah tanpa perlu terapi seperti halnya dengan bandage
- Nyaman di pakai dapat di sertai pemakaian sepatu
- Tekanan lebih terkontrol
- Perban atau plester dapat menempel dengan baik

Material composition

TRADITIONAL compression stocking:

70% polyamide, 30% elastodiene

Understocking: 62% polyamide, 26% elastane, 12% cotton

Donning and doffing

Applying the understocking



- One **understocking** with low pressure (15 – 20 mmHg)



+

- One **overstocking** with 23 – 32 mmHg of pressure



=

This **combination** exerts a total pressure ~ 45 mmHg² on the ankle.



Good to know

Contraindications for compression therapy

Relative

- acute weeping dermatoses
- intolerance to compression stocking material
- paraesthesia in the limb extremities
- severe peripheral neuropathy (e.g. diabetes mellitus)
- primary chronic polyarthritis

Absolute

- severe arterial occlusive disease
- congestive heart failure
- septic phlebitis
- phlegmasia cerulea dolens

Care

After wearing, the stockings should be washed by hand or at max. 40 °C (understockings: max. 60 °C) with a gentle wash cycle in the washing machine in a laundry net. It is important to use a mild detergent without fabric softener. The Sigvaris Washing Solution is suitable for washing by hand.

To preserve maximum durability of the product, please inform your customers that we do not recommend using a dryer/heater. The stockings must not be ironed or dry cleaned. The stockings should be stored dry at room temperature away from direct sunlight.



THROMBO-X

Anti Embolism Stockings
mencegah thrombosis pada
pasien imobilisasi

Fitur Produk:

- Kompresi 18mmHg pada ankle
- Bahan dirajut dengan sistem ventilasi memberi kesejukan pada kaki dan nyaman di kulit
- Lembut dan mudah digunakan
- Terdapat lubang di ujung jari sebagai inspection hole
- Hanya tersedia warna putih

Indikasi:

- Semua situasi dimana meningkatkan resiko terjadi thrombosis terutama pada pasien imobilisasi
- Surgery - terutama abdominal pelvic and orthopedic surgery
- Fractures or injuries of the lower limbs

Kontra Indikasi:

- Dermatitis
- Advance peripheral arterial occlusive disease

Material:

- 81% Polyamide, 17% Elasten, 2% Polypropylene

A-D

A-G



Calf




Grip Top



Inspection Hole

Length / Länge
ℓ (cm)

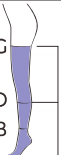			S	M	L	XL	XXL	
			CB 18 – 22 cm	CB 22 – 26 cm	CB 26 – 29 cm	CB 29 – 32 cm	CB 32 – 35 cm	
			CD 29 – 35 cm	CD 34 – 40 cm	CD 39 – 45 cm	CD 44 – 51 cm	CD 50 – 56 cm	
			CG 43 – 54 cm	CG 48 – 60 cm	CG 54 – 66 cm	CD 60 – 72 cm	CG 67 – 80 cm	
AD		short	33 – 38					
		normal	38 – 43					
		long	43 – 48					
AG		short	60 – 70					
		normal	70 – 80					
		long	80 – 90					

S	M	L	XL	XXL
CB 18 – 22 cm	CB 22 – 26 cm	CB 26 – 29 cm	CB 29 – 32 cm	CB 32 – 35 cm
CD 29 – 35 cm	CD 34 – 40 cm	CD 39 – 45 cm	CD 44 – 51 cm	CD 50 – 56 cm
CG 43 – 54 cm	CG 48 – 60 cm	CG 54 – 66 cm	CD 60 – 72 cm	CG 67 – 80 cm

MICROFIBER SHADES by SIGVARIS



Energy



Stand



Sit



Travel

Kaos kaki kompresi kini tampil lebih gaya!

- Mudah di pakai
- Untuk pria dan wanita
- Kompresi ringan (15-20mmHg) untuk mencegah DVT/kaki bengkak saat perjalanan jauh
- kandungan serat microfiber untuk kenyamanan maksimal
- Stylish dan elegant cocok untuk acara formal & santai
- Size berdasarkan ukuran sepatu
- Material: 87% Nylon, 13% Spandex

LOOK GREAT. FEEL GREAT

MICROFIBER SHADES FOR MEN



PURPLE
ARGYLE



BLUE
ARGYLE



GRAPHITE
ARGYLE



GRAPHITE
STRIPE



DARK NAVY
STRIPE



ONYX
STRIPE

Shoe Size : A (39-41) B (42-44) C (45-48)

MICROFIBER SHADES FOR WOMEN



PURPLE
ARGYLE



PLATIN
ARGYLE



CHERRY
ARGYLE



JEANS
STRIPE



ONYX
STRIPE



WINE
STRIPE

Shoe Size : A (35-37) B (38-40) C (41-44)



75%

Pembengkakan kaki berkurang 75% selama penerbangan panjang dengan TRAVENO

TRAVENO travel socks

TRAVENO travel socks Kaos kaki pendukung perjalanan, teman ideal, anda saat bepergian. secara signifikan menurunkan resiko trombosis dan mengurangi pembengkakan pada pergelangan kaki dan tungkai

TRAVENO travel socks mencegah bau dan memberikan kenyamanan maksimal TRAVENO travel socks adalah investasi terbaik untuk kaki yang sehat dan merupakan suatu keharusan untuk setiap perjalanan, untuk kaki yang sehat dan merupakan suatu keharusan untuk setiap baik itu dengan pesawat, kereta api atau mobil.

Manfaat TRAVENO untuk anda

Mengurangi kaki bengkak

Bahan nyaman tidak panas

Ideal untuk bepergian

Manfaat medis terbukti



Dune



Black

TRAVENO product detail

- Intensive graduated support (15-18mmHg around the ankle region)
- Reduced swelling of the legs
- Breathable and easy-care
- Unisex

Material

89% Polyamide

11% Elastane

Color



Dune



Black

SIZING CHART

Shoe Size	EU	UK	Colors
1	36-37	3.5-4.5	 dune  black
2	38-39	5-6	
3	40-41	6.5-7.5	
4	42-43	8-9	
5	44-45	9.5-10.5	

DOFF N DONNER

Alat bantu pakai dan melepas compressions stockings / arm sleeve yang revolusioner, praktis, mudah, cepat.

Keunggulan :

- Cara cepat dan mudah untuk pakai dan lepas stocking, sehingga meningkatkan keberhasilan treatment
- Hanya butuh tenaga sedikit untuk memakai dan melepas stocking
- Dapat digunakan sendiri tanpa bantuan orang lain
- Cocok untuk segala jenis bentuk kaki



DOFF N DONNER



CONE



 SCAN ME



Cara
Pasang

GLOVES

Kini pakai dan lepas
stocking jadi lebih mudah



TEXTILE GLOVES

Sarung tangan tekstil berkualitas tinggi dengan permukaan lateks memberikan cengkeraman yang baik saat memasang dan melepas stoking

Size : XS, S, M & L

Material : 71% Lateks, 28% Nilon, 1% Polyester


Color : Biru

A healthcare professional, wearing a white short-sleeved shirt and dark pants, is kneeling on a light-colored wooden floor. They are using a long, thin measuring tape to measure the lower leg of a patient who is standing. The patient is wearing dark-colored pants. The background is a light-colored brick wall. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The text 'Form ukur' is prominently displayed in the center, with 'SIGVARIS COMPRESSION STOCKINGS' written below it in a smaller, all-caps font.

Form ukur

SIGVARIS COMPRESSION STOCKINGS

Nama Pasien : _____
 Tanggal Lahir : _____
 No. Telepon : _____
 Nama Dokter : _____

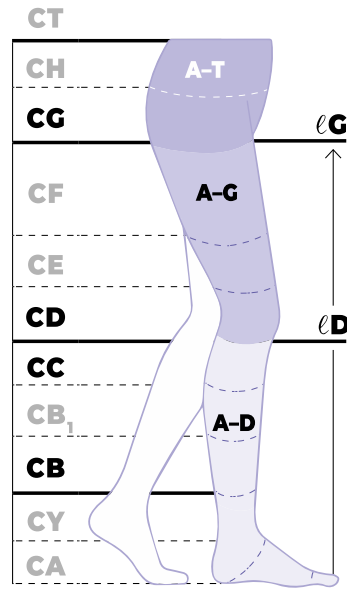

**Ukuran
Lingkar (cm)**

Kiri Kanan

CG _____
CD _____
CC _____
CB _____

Stocking Size Charts

		Ukuran Lingkar (cm)											
		XXS	XXS Plus	XS	XS Plus	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus	XL	XL Plus
CT		60-75	65-80	65-80	75-90	75-90	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130
CH		75-90	80-95	80-95	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130	115-130	125-140
CG	without grip top	42-54	47-59	47-59	52-64	52-64	56-68	56-68	61-74	61-74	66-79	66-79	73-85
	with grip top	42-52	47-56	47-56	52-61	52-61	56-65	56-65	61-71	61-71	66-76	66-76	73-85
CF		38-49	41-52	41-52	44-55	44-55	49-60	49-60	53-64	53-64	59-70	59-70	63-78
CE		29-36	33-40	33-40	37-44	37-44	39-46	39-46	41-48	41-48	45-52	45-52	46-53
CD		23-30	27-34	27-34	31-38	31-38	34-41	34-41	37-44	37-44	41-48	41-48	42-50
CC		25-32	29-36	29-36	33-40	33-40	35-42	35-42	38-45	38-45	42-49	42-49	43-51
CB₁		22-26	22-26	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-37	31-37	33-39	33-39
CB		18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32
CY		27-31	27-31	28-33	28-33	29-35	29-35	31-37	31-37	32-38	32-38	33-39	33-39
CA		18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32

Panjang (cm)					
short*	31 - 34	short	56 - 64	short**	56 - 64
normal	35 - 40	normal	65 - 74	normal	65 - 74
long	41 - 45	long	75 - 84	long	75 - 84



SCAN ME



**Cara
Ukur**




**Cara
Pasang**



**Cara
Perawatan**

Nama Pasien : _____
Tanggal Lahir : _____
No. Telepon : _____
Nama Dokter : _____

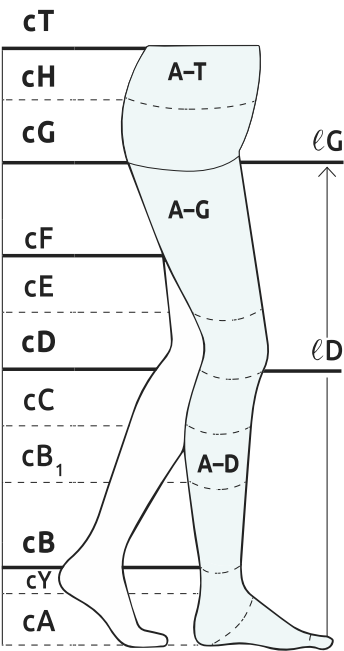

Ukuran
Lingkar (cm)
Kiri Kanan

CG _____
CD _____
CC _____
CB _____

Size
Charts

	Ukuran Lingkar (cm)					
	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus
cT	up to 80	up to 80	up to 90	up to 90	up to 100	up to 100
cH	up to 110	up to 110	up to 120	up to 120	up to 130	up to 130
cG	42-52	50-60	50-60	58-68	58-68	66-76
cF	41-50	45-54	48-57	53-62	55-64	61-70
cE	32-37	36-41	35-40	40-45	38-43	44-49
cD	28-34	32-38	31-37	36-42	34-40	40-46
cC	31-36	35-40	34-39	39-44	37-42	43-48
cB ₁	24-29	24-29	29-32	29-32	32-36	32-36
cB	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29
cY	28-32	28-32	32-35	32-35	35-38	35-38
cA	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29

Panjang (cm)					
short	33 – 37	short	61 – 70	short	61 – 70
long	38 – 44	long	71 – 80	long	71 – 80
 A-D A-G A-T					

A-D : stocking sampai bawah lutut (calf)
A-G : stocking sampai paha (thigh)
A-T : stocking sampai pinggang (pantyhose)

SCAN ME



Cara
Ukur



Cara
Pasang




Cara
Perawatan

Nama Pasien : _____

Tanggal Lahir : _____

No. Telepon : _____

Nama Dokter : _____

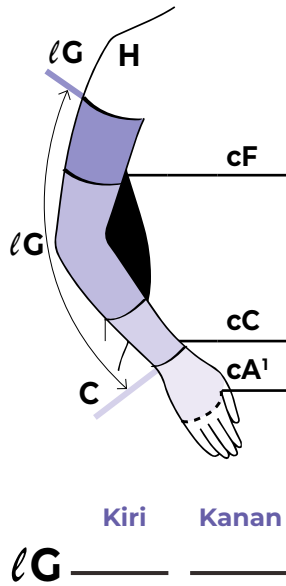

**Ukuran
Lingkar (cm)**

Kiri Kanan

CF _____

CC _____

CA' _____

Kiri Kanan

lG _____

Ukuran Lingkar (cm)

	XS	XS Plus ²	S	S Plus ²	M	M Plus ²	L	L Plus ²	XL	XL Plus ²
cF	24-32	32-38	26-34	34-40	29-37	37-43	32-40	40-46	34-42	42-48
cC	13-14	13-14	14-16	14-16	16-18	16-18	18-20	18-20	20-23	20-23
cA'	16-20	16-20	17-21	17-21	18-22	18-22	19-23	19-23	20-24	20-24

1. Hanya tersedia pada model AG
2. Size Plus hanya tersedia Sensinova grip top


Panjang (cm)

normal <43

long >43


Model

A-G

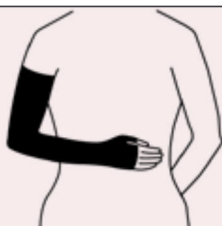

Sampai telapak tangan

C-G

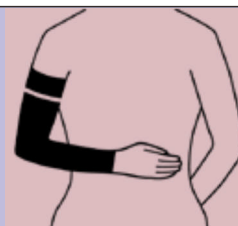

Sampai pergelangan tangan

SCAN ME



**Cara
Perawatan**

FORM UKUR

Inelastic Wrap - Calf
Compreflex® Standard Calf

Nama Pasien : _____
Tanggal Lahir : _____
No. Telepon : _____
Nama Dokter : _____


Ukuran Lingkar (cm)

	Kiri	Kanan
D	_____	_____
C	_____	_____
B1	_____	_____
B	_____	_____

Panjang (G)

Regular : 30-33.9cm
Tall: 34-42cm

G _____

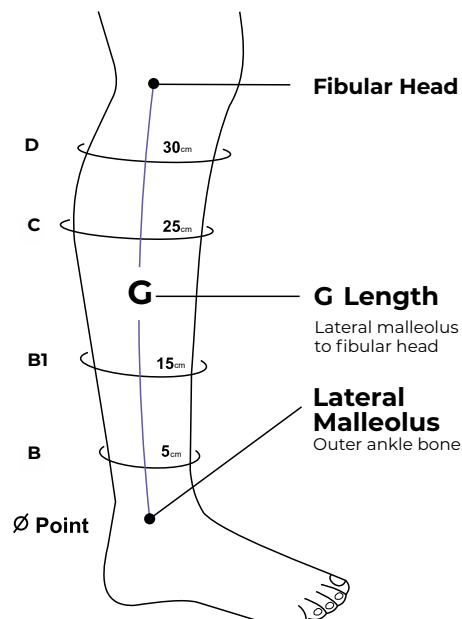

Compreflex Standard Calf Size Chat (A-C1)

	Small	Medium	Large	X Large	XX Large
D	29-39cm	34-44cm	40-50cm	46-56cm	54-64cm
C	29-39cm	34-44cm	40-50cm	46-56cm	54-64cm
B1	24-34cm	29-39cm	34-44cm	39-49cm	44-55cm
B	19-26cm	21-30cm	26-36cm	31-41cm	36-46cm

SCAN ME



Cara Ukur



Cara Pasang



Cara Perawatan

FORM UKUR

Inelastic Wrap - Foot
Compreboot Standard

Ukuran Lingkar (cm)


Kiri Kanan

Y _____

A _____

Panjang (cm)

Ai _____

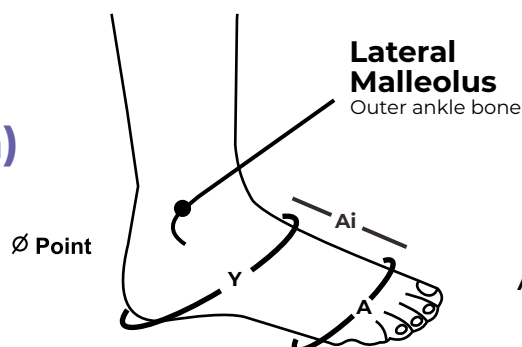

Measuring Instructions

Y: Measure circumference of ankle bend and heel
A: Measure circumference of across metatarsal heads
Ai: Measure lenght from heel to 1st metatarsal head

Ai: Measure medical length from heel to 1st metatarsal head

Compreboot Standard Foot Size Chart (I-K)


	Small		Medium / Large		X Large / XX Large	
	Regular	Long	Regular	Long	Regular	Long
Y	28-36cm	28-36cm	≤39cm	≤39cm	≤44cm	≤44cm
A	22-26cm	22-26cm	≤30cm	≤30cm	≤33cm	≤33cm
Ai	14-18cm	19-23cm	18-20cm	23-25cm	20-22cm	25-27cm

Nama Pasien : _____

Tanggal Lahir : _____

No. Telepon : _____

Nama Dokter : _____

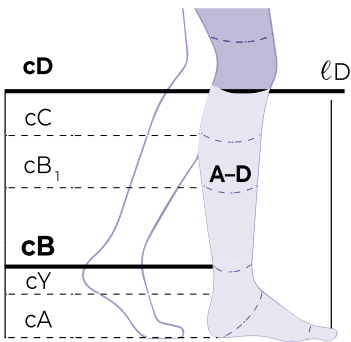

Ukuran
Lingkar (cm)

Kiri Kanan

CD _____

CB _____

	Ukuran Lingkar (cm)									Length cm	
	XS	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus	XL	XL Plus		
cD	26-32	28-34	32-38	31-37	36-42	34-40	40-46	38-43	44-49	short	33 – 37
cC	28-31	31-36	35-40	34-39	39-44	37-42	43-48	40-45	47-52	long	38 – 44
cB ₁	21-24	24-29	24-29	29-32	29-32	32-36	32-36	35-39	35-39		
cB	17-19	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29	29-32	29-32		
cY	25-28	28-32	28-32	32-35	32-35	35-38	35-38	38-41	38-41		
cA	17-19	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29	29-32	29-32		

Material composition:
TRADITIONAL compression stocking:
70% polyamide, 30% elastodiene

Understocking:
62% polyamide, 26% elastane, 12% cotton

SCAN ME



Cara
Ukur

FORM UKUR

Inelastic Wrap - Knee Compreflex® Standard Knee

Nama Pasien : _____

Tanggal Lahir : _____

No. Telepon : _____


Nama Dokter : _____

Ukuran Lingkar (cm)

Kiri Kanan

D _____

C1 _____

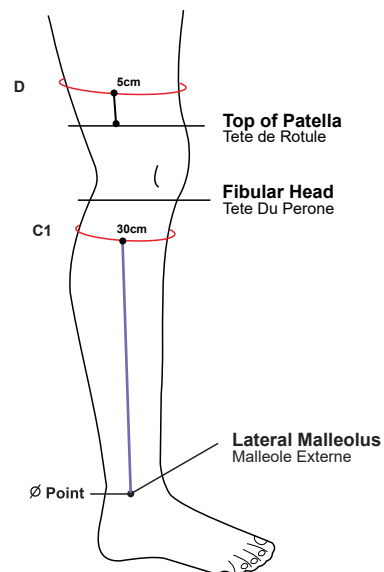

Compreflex® Standard Knee (D-E)

	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
D	38-48 cm	46-56 cm	53-63 cm	58-73 cm
C1	29-39 cm	34-44 cm	39-49 cm	44-65 cm

SCAN ME



Cara Perawatan

FORM UKUR

Inelastic Wrap - Thigh Compreflex® Standard Thigh

Nama Pasien : _____

Tanggal Lahir : _____

No. Telepon : _____

Nama Dokter : _____


Ukuran Lingkar (cm)

Kiri Kanan

G _____

F _____

E _____

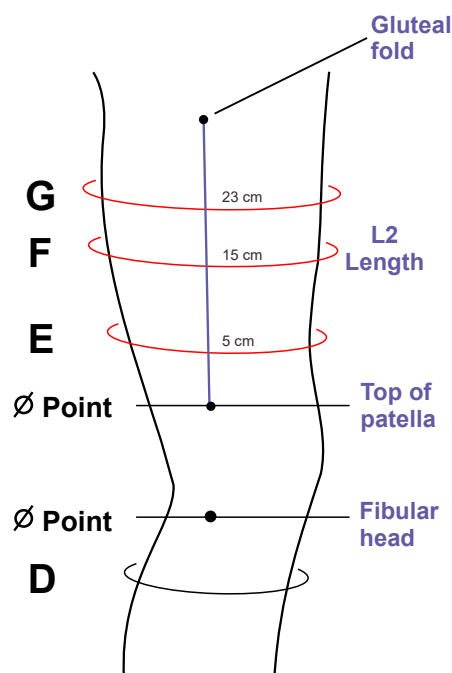

Compreflex® Standard Thigh (E-G)

	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
G	48-58 cm	56-66 cm	64-74 cm	74-84 cm
F	43-53 cm	51-61 cm	58-68 cm	68-78 cm
E	38-48 cm	46-56 cm	53-63 cm	63-73 cm
L1	REGULAR: 20-24.9 cm			


SCAN ME



Cara Pasang



Cara Perawatan

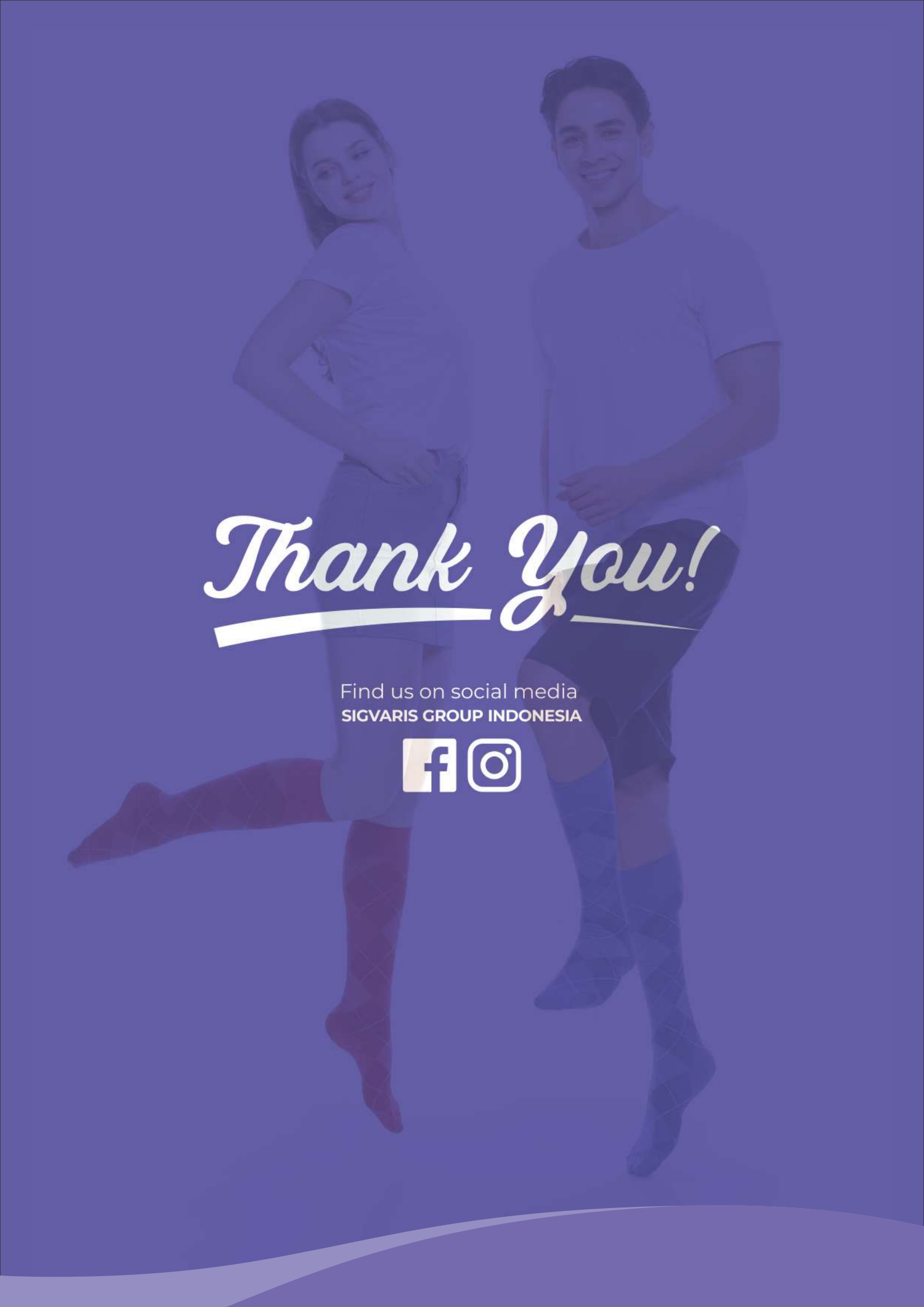

Thank You!

Find us on social media
SIGVARIS GROUP INDONESIA

